

Chaise de douche Tasman Réglable en hauteur

NOTICE D'UTILISATION



Lire attentivement ce mode d'emploi
avant toute utilisation.

Vitadomia



Version juin 2026

CHAISE DE DOUCHE TASMAN - REGLABLE EN HAUTEUR

Vous venez d'acquérir une chaise de douche de la marque Vitadomîa et nous vous remercions de votre confiance. Nous sommes sûrs qu'elle vous apportera quotidiennement un maximum de confort. Vitadomîa propose une large gamme de produits d'aide à domicile. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur pour de plus amples renseignements.

Avant d'utiliser cette chaise de douche, lisez entièrement et attentivement ce manuel. Il vous permettra de vous familiariser avec la manipulation du produit.

Vous y trouverez également des instructions de sécurité, de nettoyage et de maintenance vous permettant de garantir la bonne utilisation de votre produit et de le garder en bon état de fonctionnement.

Le respect des instructions d'utilisation et de maintenance est une condition essentielle de la garantie et nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables des préjudices corporels en cas de non respect des consignes ou encore d'une mauvaise utilisation du produit.


La chaise de douche a été conçue pour faciliter et sécuriser l'utilisation de la douche.

Caractéristiques techniques :

- Composition : Siège en polyéthylène haute densité et structure en aluminium.
- Dimensions au sol : 50 cm x 43 cm
- Dimension chaise : L 40 cm X P 50 cm X H 37 à 47 cm
- Poids maximal utilisateur : 130 Kg.

Liste des éléments inclus dans l'emballage

- 1 x Siège (a)
- 1 x Dossier (b)
- 2 x pièces de châssis dossier en aluminium (e)
- 4 x rallonge pied en aluminium (f)
- 4 x vis Longs (g)
- 5 x vis courtes (h)
- 2 Rondelles (i)
- 1 écrou (j)
- 1 entretoise (k)
- 1 Boulon long (l)

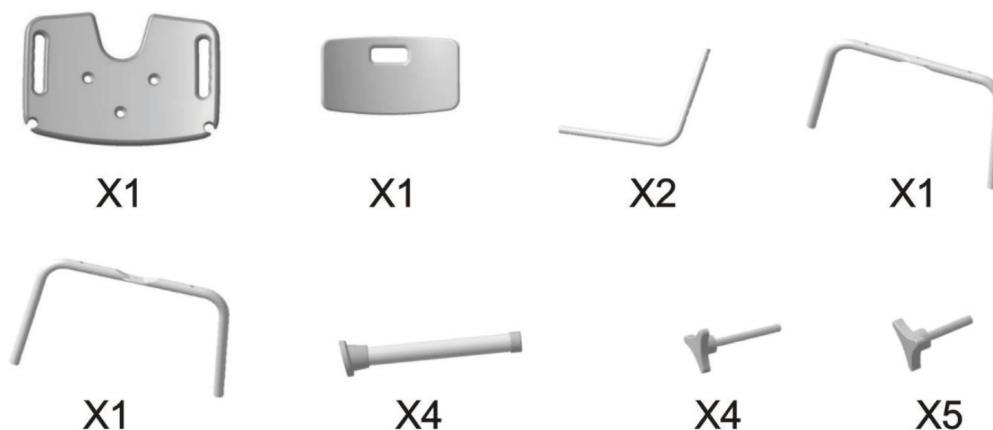

La chaise se compose d'un châssis en aluminium et d'une assise + dossier en plastique, il ne rouille pas.

Installation : Sortir le produit de son emballage, vérifier que tous les éléments sont inclus et suivre les instructions.

ATTENTION : Le montage du produit doit s'effectuer sur une surface plane et propre.

Figure 1

Etape 1 :

Installer les tubes en aluminium marqués A et B comme illustré. Placer la vis centrale BLEUE au centre du croisement des tubes.



Etape 2 :

Monter les 4 rallonges de pied en veillant à ce que les doigts de verrouillage soient bien enclenchés dans les trous.

Figure 2

Etape 3 :

Monter les tubes du dossier comme illustré. Utiliser les vis longues. Ne pas bloquer les vis afin de laisser du jeu lors du montage du dossier.



Etape 4 :

Monter le dossier comme illustré. Utiliser les 4 vis courtes. Puis serrer toutes les vis installées. Insérer les 4 rallonges de pied (f) sur le châssis de la chaise maintenant constituée.

Attention:

Toutes les vis doivent être correctement serrées et régulièrement vérifiées. De-même bien s'assurer que les doigts de verrouillage des rallonges de pied soient correctement enclenchés.

Capacité maxi = 130 Kg

Entretien : Nettoyer avec un détergent neutre. Ne pas utiliser de solvant.

Figure 3

ATTENTION :

Vérifier que le produit est correctement installé, stable et le sol dégagé de tout obstacle avant l'utilisation.



Ajuster la hauteur

Pour ajuster la hauteur du siège afin l'adapter à l'utilisateur, appuyer sur les boutons pressoirs et les placer dans les crans souhaités vers le haut ou vers le bas. Le siège dispose de 5 niveaux de réglage pour une hauteur jusqu'à 47 cm.

ATTENTION : Les boutons pressoirs de chaque pied doivent être placés au même niveau de réglage afin d'assurer la stabilité du siège et la sécurité de l'utilisateur. Vérifier régulièrement les vis et les resserrer si nécessaire.

Conditions d'utilisation et sécurité

Utiliser le siège de douche pour l'usage prévu.

Si le produit n'est pas stable ou correctement installé, ne pas utiliser le produit.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas stocker à l'extérieur, ne pas laisser au soleil, ne pas laisser dans un véhicule en plein soleil.

Ne pas utiliser lors de températures extrêmes (supérieur à environ 38°C ou 100°F ou inférieur à 0°C ou 32°F).

Vérifier régulièrement si tous les raccords vissés sont serrés correctement.

Respecter la limitation de poids comme indiqué (130 kg).

Ne rien suspendre à votre chaise afin d'éviter de la déséquilibrer.

En cas de non utilisation pendant une longue période, vérifier le produit et notamment le serrage des vis.

Entretien

La chaise doit être nettoyée régulièrement avec un chiffon propre et sec et un nettoyant ménager non abrasif.

Mise au rebut

Veillez mettre au rebut ce produit en conformité avec les règles en vigueur. N'hésitez pas à contacter votre mairie ou la déchetterie la plus proche.

Garantie

Cette chaise est garantie 2 ans à partir de la date d'achat contre tout vice de fabrication. Attention de bien respecter les consignes de sécurité et conditions d'utilisation.

Fabricant :

NINGBO SHENYU MEDICAL EQUIPMENT
CO.,LTD.
NO.1318, WEST OF TANJIALING
ROAD, 315408 YUYAO CITY, NINGBO CHINA
TEL : 0086-574-62517967
FAX : 0086-574-62516668

Mandataire européen :

SUNGO EUROPE,
FASCINATIO BOULEVARD 522,
UNIT 1.7, 2909 VA CAPELLE AAN
DEN IJSSEL,
NETHERLANDS

Importateur :

Oxypharm
39 rue des Augustins
76178 Rouen Cedex
FRANCE

Distributeur :

Oxypharm
39 rue des Augustins
76178 Rouen Cedex
FRANCE

In hoogte verstelbare douchestoel Tasman

GEBRUIKSAANWIJZING



Lees deze instructies zorgvuldig
Voor het gebruik van

Vitadomia



Editie Juni 2026

IN HOOGTE VERSTELBARE DOUCHESTOEL TASMAN

U heeft zojuist een Vitadomîa douchestoel aangeschaft en wij danken u voor uw vertrouwen. Wij zijn er zeker van dat het u elke dag maximaal comfort zal brengen. Vitadomîa biedt een breed scala aan huishoudelijke hulpmiddelen. Aarzel niet om contact op te nemen met uw dealer voor meer informatie.

Lees deze handleiding grondig en zorgvuldig door voordat u deze douchestoel in gebruik neemt. Het zal u vertrouwd maken met de behandeling van het product.

Het bevat ook veiligheids-, reinigings- en onderhoudsinstructies om ervoor te zorgen dat uw product correct wordt gebruikt en in goede staat blijft.

De naleving van de bedienings- en onderhoudsinstructies is een essentiële voorwaarde van de garantie en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel veroorzaakt door niet-naleving of verkeerd gebruik van het product.

De douchestoel is ontworpen om het douchen gemakkelijker en veiliger te maken.

Technische kenmerken.

- Samenstelling: hoge dichtheid polyethyleen zitting en aluminium structuur.
- Afmeting vloer: 50cm X 43cm
- Afmeting stoel: B40cm X D 50cm X H 37 tot 47cm
- Maximaal gebruikersgewicht: 130 KG

Lijst van artikelen in het pakket

- 1X Stoel (a)
- 1X rugleuning (b)
- 2X aluminium rugleuning framedelen (e)
- 4x aluminium voetverlenging (f)
- 4x lange schroeven (g)
- 5x korte schroeven (h)
- 2 sluitringen (i)
- 1 moer (j)
- 1 afstandhouder (k)
- 1 lange bout (l)



X1



X1



X2



X1



X1



X4



X4



X5

De stoel bestaat uit een aluminium frame en een kunststof zitting en rugleuning, hij roest niet.

Installatie: Haal het product uit de verpakking, controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en volg de instructies.

WAARSCHUWING: Het product moet op een schoon, vlak oppervlak worden gemonteerd.

Stap 1:

Installeer de aluminium buizen gemarkeerd met A en B zoals afgebeeld. Plaats de BLAUWE centrale schroef in het midden van het kruispunt van de buizen.

Stap 2:

Monteer de 4 voetverlengstukken en zorg ervoor dat de vergrendelingsvingers goed in de gaten zijn geklikt.

Stap 3:

Monteer de buizen van de rugleuning zoals afgebeeld. Gebruik de lange schroeven. Draai de schroeven niet vast, zodat er speling blijft bij het monteren van de rugleuning.

Stap 4:

Monteer de rugleuning zoals afgebeeld. Gebruik de 4 korte schroeven. Draai vervolgens alle geïnstalleerde schroeven vast. Plaats de 4 voetverlengstukken (f) op het frame van de nu samengestelde stoel.

Let op:

Alle schroeven moeten goed worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd. Zorg er ook voor dat de vergrendelingsvingers van de voetverlengstukken goed zijn vergrendeld.

Maximale capaciteit = 130 kg

Onderhoud: Reinigen met een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen.

Let op:

Zorg ervoor dat het product correct geïnstalleerd en stabiel is en dat de vloer vrij is van obstakels voordat u het gebruikt.

Figuur 3

Figuur 1



Figuur 2



Figuur 3



Instellen van de hoogte

Om de hoogte van de zitting aan de gebruiker aan te passen, drukt u op de drukknoppen en plaatst u deze in de gewenste op- of neerwaartse positie. De zitting heeft 5 verstelmogelijkheden voor een hoogte tot 47 cm.

ATTENTIE: De drukknoppen op elke poot moeten op hetzelfde verstelniveau worden geplaatst om de stabiliteit van de stoel en de veiligheid van de gebruiker te garanderen. Controleer de schroeven regelmatig en draai ze zo nodig opnieuw aan.

Gebruiksvoorwaarden en veiligheid:

Gebruik het douchezitje waarvoor het bedoeld is.

Gebruik het product niet als het niet stabiel of correct geïnstalleerd is.

Wijzig de structuur van het product niet en bereid het niet zelf.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan het product als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud.

Buiten bereik van kinderen houden.

Niet buiten bewaren, niet in de zon laten liggen, niet in een voertuig in direct zonlicht laten liggen.

Niet gebruiken bij extreme temperaturen (boven ongeveer 38°C of 100°F of onder 0°C of 32°F)

Controleer regelmatig of alle schroefverbindingen goed vastzitten.

Respecteer de gewichtslimiet zoals aangegeven (130KG)

Hang niets aan uw stoel om hem niet uit balans te brengen.

Controleer het product en in het bijzonder de vastheid van de schroeven wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt.

Onderhoud

De stoel moet regelmatig worden schoongemaakt met een droge doek en een niet-schurend huishoudelijk schoonmaakmiddel.

Verwijdering

Voer dit product af volgens de geldende voorschriften. Neem contact op met uw gemeente of het dichtstbijzijnde afvalverwerkingscentrum.

Garantie

Deze stoel heeft een garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop tegen fabricagefouten.

Volg de veiligheidsvoorschriften en gebruiksvoorwaarden.

Fabrikant :

NINGBO SHENYU MEDICAL EQUIPMENT
CO.,LTD.
NO.1318,WEST OF TANJIALING
ROAD,315408YUYAO CITY, NINGBO CHINA
TEL : 0086-574-62517967
FAX : 0086-574-62516668

Europese vertegenwoordiger :

SUNGO EUROPE,
FASCINATIO BOULEVARD 522,
UNIT 1.7, 2909 VA CAPELLE AAN
DEN IJSSEL,
NETHERLANDS

Importeur :

Oxypharm
39 rue des Augustins
76178 Rouen Cedex
FRANCE

Verdeler :

Oxypharm
39 rue des Augustins
76178 Rouen Cedex
FRANCE

Höhenverstellbarer Duschstuhl

GEBRAUCHSANWEISUNG



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung
aufmerksam durch!

Vitadomia



Ediite Juni 2026

HÖHENVERSTELLBARER DUSCHSTUHL

Sie haben gerade einen Duschstuhl der Marke Vitadomía erworben und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Wir sind sicher, dass er Ihnen täglich ein Höchstmaß an Komfort bieten wird. Vitadomía bietet eine breite Palette an Produkten für die häusliche Pflege an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bevor Sie diesen Duschstuhl benutzen, sollten Sie diese Anleitung vollständig und aufmerksam durchlesen. Es wird Ihnen helfen, sich mit der Handhabung des Produkts vertraut zu machen.

Sie finden darin auch Sicherheits-, Reinigungs- und Wartungsanweisungen, die Ihnen helfen, Ihr Produkt richtig zu benutzen und in gutem Zustand zu halten.

Die Einhaltung der Gebrauchs- und Wartungsanweisungen ist eine wesentliche Voraussetzung für die Garantie und wir können nicht für Personenschäden haftbar gemacht werden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen oder durch eine unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.


Der Duschstuhl wurde entwickelt, um das Duschen einfacher und sicherer zu machen.

Technische Merkmale.

- Zusammensetzung: Sitz aus hochdichtem Polyethylen und Aluminiumgestell.
- Abmessung am Boden: 50cm X 43cm.
- Abmessungen Stuhl: B40cm X T 50cm X H 37 bis 47cm.
- Maximales Benutzergewicht: 130 KG.

Liste der in der Verpackung enthaltenen Elemente

- 1X Sitz (a)
- 1X Rückenlehne (b)
- 2X Rahmenteile Rückenlehne aus Aluminium (e)
- 4x Fußverlängerung aus Aluminium (f)
- 4x lange Schrauben (g)
- 5x kurze Schrauben (h)
- 2 Unterlegscheiben (i)
- 1 Mutter (j)
- 1 Abstandshalter (k)
- 1 lange Schraube (l)

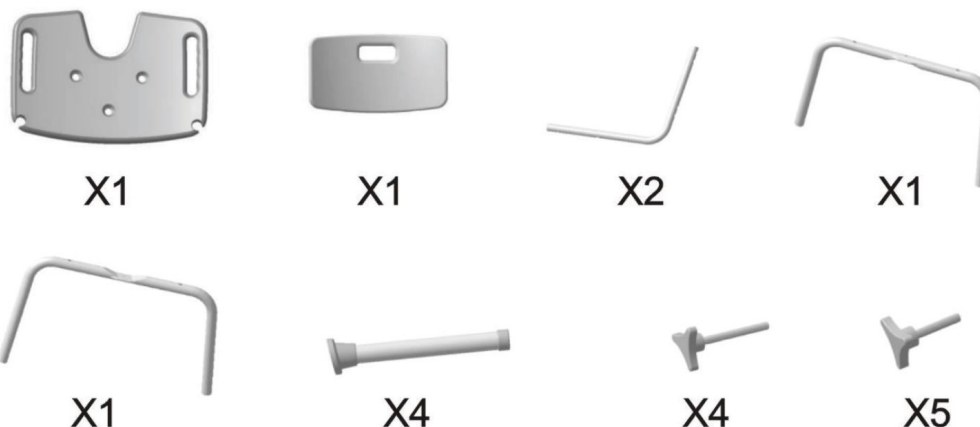

Der Stuhl besteht aus einem Aluminiumrahmen und einer Sitzfläche + Rückenlehne aus Kunststoff, er rostet nicht.

Installation: Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung, überprüfen Sie, ob alle Teile enthalten sind, und folgen Sie den Anweisungen.

ACHTUNG: Die Montage des Produkts muss auf einer sauberen, ebenen Fläche erfolgen.

Schritt 1:

Installieren Sie die mit A und B gekennzeichneten Aluminiumrohre wie abgebildet. Setzen Sie die BLAUE Mittelschraube in die Mitte der Rohrkreuzung ein.

Schritt 2:

Montieren Sie die 4 Fußverlängerungen und achten Sie dabei darauf, dass die Verriegelungsfinger richtig in die Löcher einrasten.

Schritt 3:

Montieren Sie die Rückenlehnenrohre wie abgebildet. Verwenden Sie die langen Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest, damit bei der Montage der Rückenlehne Spielraum bleibt.

Schritt 4:

Montieren Sie die Rückenlehne wie abgebildet. Verwenden Sie die 4 kurzen Schrauben. Ziehen Sie anschließend alle montierten Schrauben fest. Setzen Sie die 4 Fußverlängerungen (f) auf das nun fertiggestellte Stuhlgestell.

Achtung:

Alle Schrauben müssen fest angezogen und regelmäßig überprüft werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Verriegelungsfinger der Fußverlängerungen richtig eingerastet sind.

Maximale Belastbarkeit = 130 kg

Pflege: Mit einem neutralen Reinigungsmittel reinigen. Keine Lösungsmittel verwenden.

Achtung:

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass das Produkt richtig und stabil aufgestellt und der Boden frei von Hindernissen ist.

Abbildung 3

Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Die Höhe anpassen

Um die Höhe des Sitzes an den Benutzer anzupassen, drücken Sie die Druckknöpfe und bringen Sie sie in die gewünschten Rastungen nach oben oder unten. Der Sitz kann in 5 Stufen bis zu einer Höhe von 47 cm verstellt werden.

ACHTUNG: Die Druckknöpfe an jedem Fuß müssen auf der gleichen Stufe stehen, um die Stabilität des Sitzes und die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten.

Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.

Nutzungsbedingungen und Sicherheit

Verwenden Sie den Duschstuhl für den vorgesehenen Zweck.

Wenn das Produkt nicht stabil oder richtig installiert ist, darf es nicht verwendet werden.

Verändern Sie die Struktur des Produkts nicht und bereiten Sie es nicht selbst vor.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden am Produkt, die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung entstehen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht im Freien lagern, nicht in der Sonne lagern, nicht in einem Fahrzeug in der prallen Sonne lagern.

Nicht bei extremen Temperaturen verwenden (über ca. 38°C bzw. 100°F oder unter 0°C bzw. 32°F).

Überprüfe regelmäßig, ob alle Schraubverbindungen richtig angezogen sind.

Beachten Sie die Gewichtsbeschränkung wie angegeben (130KG).

Hängen Sie nichts an Ihren Stuhl, um zu vermeiden, dass er aus dem Gleichgewicht gerät.

Wenn Sie den Stuhl über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, überprüfen Sie das Produkt und insbesondere den festen Sitz der Schrauben

Pflege

Der Stuhl sollte regelmäßig mit einem trockenen Tuch und einem nicht scheuernden Haushaltsreiniger gereinigt werden.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den geltenden Vorschriften. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihre Stadtverwaltung oder die nächste Müllabfuhr.

Garantie

Für diesen Stuhl gilt eine Garantie von zwei Jahr ab Kaufdatum auf Herstellungsfehler.

Achten Sie darauf, dass Sie die Sicherheitshinweise und Nutzungsbedingungen beachten.

Hersteller :

NINGBO SHENYU MEDICAL EQUIPMENT
CO.,LTD.
NO.1318, WEST OF TANJIALING
ROAD,315408YUYAO CITY, NINGBO CHINA
TEL : 0086-574-62517967
FAX : 0086-574-62516668

Europäischer Vertreter :

SUNGO EUROPE,
FASCINATIO BOULEVARD 522,
UNIT 1.7, 2909 VA CAPELLE AAN
DEN IJSSEL,
NETHERLANDS

Importeur :

Oxypharm
39 rue des Augustins
76178 Rouen Cedex
FRANCE

Distributor :

Oxypharm
39 rue des Augustins
76178 Rouen Cedex
FRANCE